



# Корзина КРИО-ВТ-06-К

Паспорт ТКЛШ 2.998.053 ПС

## 1 Назначение изделия

1.1 Корзина с крышкой КРИО-ВТ-06-К предназначена для размещения различных объектов во внутренней ванне жидкостного низкотемпературного термостата КРИО-ВТ-06. Корзина с регулируемым по высоте дном позволяет обеспечить погружение объектов в теплоноситель на необходимую глубину.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

## 2 Технические характеристики

2.1 Внутренние размеры корзины, мм ..... 300×200×120

2.2 Масса, кг, не более ..... 2.7

## 3 Устройство и использование изделия

3.1 Внешний вид корзины показан на рисунке 1. Комплект поставки КРИО-ВТ-06-К соответствует перечню, указанному в таблице 1.

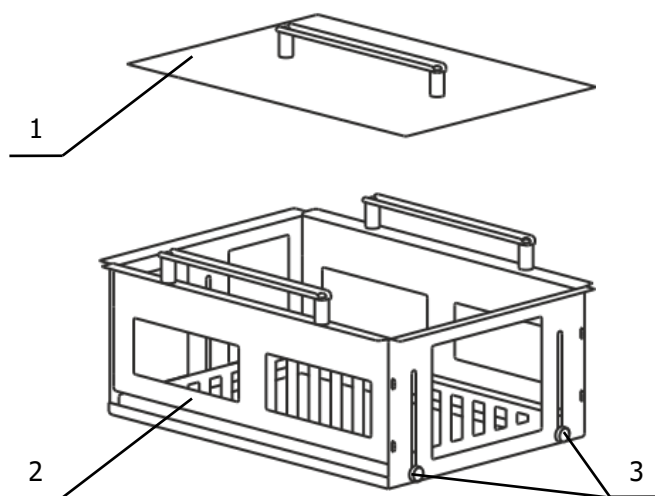


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Крышка	ТКЛШ 6.172.001-14	1
2 Корзина	ТКЛШ 6.871.003	1

3.2 Для регулирования глубины погружения образцов поднять дно корзины на необходимую высоту (в диапазоне от 25 до 104 мм) и зафиксировать винтами 3.

#### 4 Сведения о приемке

Корзина КРИО-ВТ-06-К соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признана годной для применения.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П.


ОКК \_\_\_\_\_


#### 5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

 (3822) 49-21-52.

 [termex@termexlab.ru](mailto:termex@termexlab.ru)

 <http://termexlab.ru/>